



Реабілітаційний тренажер для ніг та рук «B-Bike»

4KM-500

Інструкція з експлуатації



Дякуємо, що обрали нашу продукцію.

Уважно ознайомтеся з цією інструкцією та дотримуйтесь її під час використання.



Цей пристрій відповідає стандарту європейської Директиви 93/42/ЄЕС

ЗМІСТ

1.	Вступ.....	3
2.	Заходи безпеки	3
3.	Технічні характеристики.....	4
4.	Умови використання	5
5.	Функція «анти-спазм»	5
6.	Збирання виробу.....	5
7.	Використання пристрою.....	6
8.	Вправи	7
9.	Технічне обслуговування та догляд.....	7
10.	Належна утилізація продукту.....	8
11.	Відомості про сертифікацію	8
12.	Умови гарантії.....	9

1. Вступ

Дякуємо, що надали перевагу нашій продукції. Будь ласка, уважно ознайомтесь з цією Інструкцією та дотримуйтеся її під час використання виробу.



Не використовуйте реабілітаційний тренажер, не ознайомившись з Інструкцією.

Не використовуйте реабілітаційний тренажер у випадку його пошкодження.

Не намагайтеся внести зміни до конструкції виробу.

ТМ «OSD» гарантує використання високоякісних матеріалів та контроль виробництва на усіх його стадіях.

Реабілітаційний тренажер для ніг та рук «4KM-500» (далі за паспортом – реабілітаційний тренажер / тренажер / пристрій / виріб) – призначений для використання людям з проблемами верхніх або нижніх кінцівок. Перед використанням пристрою необхідно проконсультуватися у лікаря.

Реабілітаційний тренажер для ніг та рук «4KM-500» розроблений для максимальної зручності та безпеки користувача.



Виробник залишає за собою право без попереднього повідомлення змінювати будь-які технічні характеристики, зазначені у цій Інструкції. Усі дані, зазначені в Інструкції, наведені для ознайомлення.

Даний виріб відповідає вимогам європейської Директиви 93/42/ЄЕС виробів медичного призначення.

2. Заходи безпеки

ТМ «OSD» не гарантує безпеку користувачеві та правильне функціонування тренажера за умов, якщо будь-який з оригінальних компонентів був змінений або замінений на неоригінальний. Перед початком використання або під час використання після тривалого зберігання переконайтеся, що усі частини пристрою закріплені та міцно зафіксовані. Регулярно перевіряйте загальний технічний стан.



Реабілітаційний тренажер не можна використовувати стоячи на ньому! Це може призвести до перекидання та травмування користувача. Правильним є використання у положенні сидячи / лежачи!

1. Перед використанням **УВАЖНО** ознайомтеся з Інструкцією.
2. Перед кожним використанням **ПЕРЕВІРЬТЕ** загальний технічний стан пристрою. Не використовуйте тренажер у разі виявлення пошкоджень.
3. Кожні два роки слід **ПРОВОДИТИ** повний кваліфікований технічний огляд тренажера.

4. НЕ ДОПУСКАЙТЕ попадання рідин на електричні частини тренажера.
5. НЕ ЗАРЯДЖАЙТЕ акумуляторну батарею у вологих приміщеннях.

3. Технічні характеристики

Параметр	Значення
Модель:	4KM-500
Тип:	пасивний / активний
Регулювання швидкості:	кнопкою на пульті
Витратомір калорій:	так
Тренування рук:	так
Швидкість обертів педалей, (об./хв.):	15 - 30 - 45 - 60
Таймер:	3 - 6 - 9 - 12 - 15 хвилин з автоматичним відключенням
Підрахунок:	кількості обертів
Напрямок обертів:	регулюється
Розміри тренажера, Д x Ш x В, (см):	44 x 42,5 x 28,5
Вага нетто, (кг):	5,7
Вага брутто, (кг):	6,7
Живлення, (В):	220 – 230
Споживана потужність, (Вт):	75
Частота, (Гц):	50
Гарантійний термін, (міс.):	12

4. Умови використання



Перевіряйте справність тренажера перед кожним використанням, якщо пристрій використовується не регулярно, то оглядайте його мінімум раз на шість місяців. На разі поломки або несправності, пошкодженень або розривів одного або декількох деталей, не використовуйте виріб.

Тренажер слід використовувати у критому, провітрюваному й добре освітленому приміщенні за температури від 5 ° С до 32 ° С та відносній вологості від 20 % до 90 %. Розміщувати тренажер слід на рівну й нековзку поверхню.



Якщо не використовуєте пристрій – ЗАВЖДИ виймайте вилку з розетки!

5. Функція «анти-спазм»

Тренажер для відновлення рухової активності верхніх і нижніх кінцівок, обладнаний унікальною функцією «анти-спазм».

Унікальність вищевказаної функції полягає у наступному: за умов виникнення м'язового спазму кінцівки тренажер припиняє рух і починає крутитися у зворотному напрямку. Якщо спазм не проходить, тренажер повністю відключається з подачею звукового сигналу.

6. Збирання виробу

Для остаточної підготовки тренажера до використання необхідно виконати наступні кроки (див. рис. 1):



Рис. 1

[5]

Офіційна веб-сторінка: osd.ua

1. Поставте пристрій на рівну та нековзку поверхню.
2. Прикрутіть гвинт на ліву педаль (від рукоятки зліва), повернувши ключ (у комплекті) проти годинникової стрілки.
3. З протилежного боку, прикрутіть гвинт на праву педаль повертаючи ключ за годинниковою стрілкою.
4. У якості альтернативи можна використовувати ручки А , що йдуть у комплекті.
5. Підключіть пристрій.



Зображення є орієнтовними. Тому, можуть відрізнятись від оригінального продукту.


7. Використання пристрою



Рис. 2

1. Підключіть шнур живлення до джерела живлення.
2. Підготуйте місце для занять.
3. Увімкніть тренажер.
4. Зніміть пульт (див. Рис. 2) дистанційного керування, який кріпиться на магніт, оберіть швидкість обертання педалей та тривалість тренування.
5. Після використання завжди відключайте тренажер від мережі!

8. Вправи

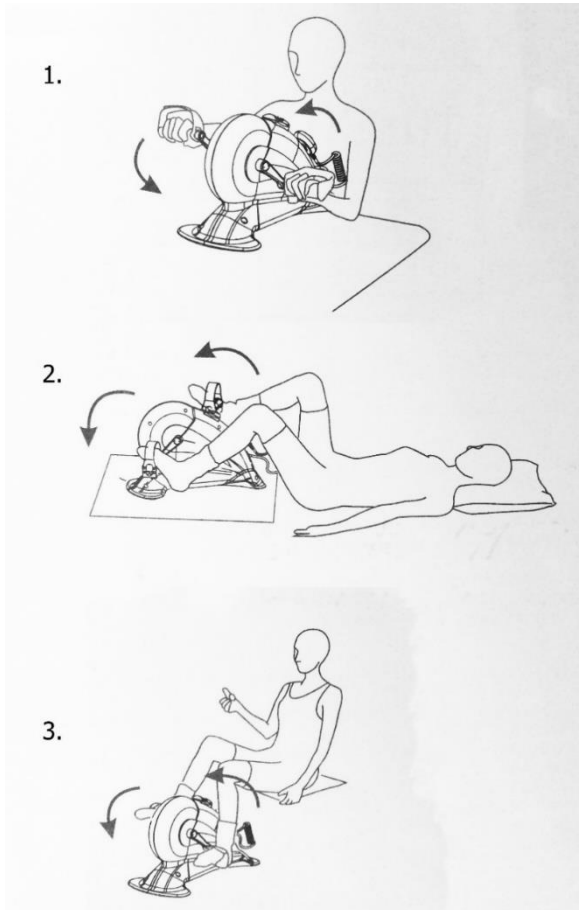

1. – Вправи для рук та плечей.
2. – Вправи, що виконуються лежачи.
3. – Вправи для ніг.

Рис. 3

9. Технічне обслуговування та догляд

Зовнішню поверхню тренажера обробляйте дезінфікуючими засобами, зареєстрованими та дозволеними в Україні для дезінфекції поверхонь за режимами, регламентованими діючими документами стосовно застосування дезінфікуючих засобів, затвердженими в установленому порядку.

Завжди тримайте тренажер у чистоті для використання протягом тривалого терміну. Очищайте за допомогою води та м'яких засобів. Не використовуйте розчинники та абразивні препарати. Протирайте ганчіркою після кожного використання.

ПРИМІТКА: Підприємство-виробник систематично веде роботи з поліпшення конструкції тренажера, тому можливі деякі зміни, не зазначені в Інструкції.




У лікарнях необхідна постійна дезінфекція. На разі використання виробу різними пацієнтами рекомендується систематично і ретельно мити та дезінфікувати тренажер, щоб уникнути інфекцій.

- ¹ Цей прилад ТМ «OSD» виготовлено в умовах застосування системи суворого контролю якості.
- ² Реабілітаційний тренажер «4KM-500» відповідає технічним умовам і визнаний придатним для експлуатації.

10. Належна утилізація продукту

Цей символ на приладі або в паспорті до нього вказує, що даний продукт не підлягає утилізації разом з іншими побутовими відходами після закінчення терміну служби. Для запобігання можливої шкоди для навколишнього середовища або здоров'я людини через неконтрольовану утилізацію відходів, будь ласка, відокремте цей прилад від інших типів відходів і утилізуйте його належним чином для раціонального повторного використання матеріальних ресурсів.

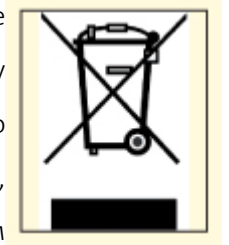

Даний продукт не містить ніяких шкідливих речовин.

11. Відомості про сертифікацію

Реабілітаційний тренажер «4KM-500» відповідає технічним вимогам і визнаний придатними для експлуатації.



Виробник: ORTHOSERVICE AG / OPTOCERVIC AG

VIA MILANO 7 – CH-6830 CHIASSO (TI) – SWITZERLAND)" / Via
Мілано 7 – ЦШ-6830 К'яссо (ТІ) – Швейцарія.

Уповноважений представник виробника в Україні: ТОВ «ОСД Східна Європа»; адреса: Україна, 03127, м. Київ, пр. 40-Річчя Жовтня, 100/2.

Номер редакції: № 7 від 29.11.2019.

Дата виготовлення: див. на упаковці.

Гарантійний термін на **реабілітаційний тренажер «4KM-500»** – 1 рік з дати продажу за умови виконання вимог Інструкції.

На частини, які швидко зношуються, гарантія не поширюється. Доставка у сервісний центр та зворотня доставка здійснюється за рахунок клієнта.





12. Умови гарантії

ТОВ «ОСД Східна Європа» гарантує відсутність заводських дефектів і роботу пристрою протягом гарантійного терміну 12 місяців з дати купівлі при дотриманні правил експлуатації виробу, викладених у Інструкції.

1. Гарантійний ремонт проводиться **тільки** протягом гарантійного терміну.
2. Виріб знімається з гарантії у наступних випадках:
 - а) порушення правил експлуатації, викладених в Інструкції;
 - б) за наявності ознак стороннього втручання (спроба самостійного ремонту виробу);
 - в) якщо пристрій використовувався не за призначенням.
3. Гарантія не розповсюджується на:
 - а) механічні пошкодження чи пошкодження внаслідок транспортування;
 - б) пошкодження, які викликані потраплянням до виробу сторонніх предметів, речовин, рідин тощо;
 - в) пошкодження, які викликані побутовими факторами, зовнішніми діями (перепади напруги у мережі), неправильне підключення пристрою.
4. Споживач має право на обмін товару належної якості протягом 14 (чотирнадцяти) днів, не враховуючи дня купівлі згідно зі статтею 9 Закону України «Про захист прав споживачів»:

Обмін товару належної якості проводиться за умови, якщо він не використовувався і якщо збережено його товарний вигляд (складений в заводську упаковку), споживчі властивості, пломби, ярлики, а також розрахунковий документ, виданий споживачеві разом із проданим товаром.

УВАГА: Артикул, технічні характеристики, колір, зовнішній вигляд та комплектація виробів можуть бути змінені виробником без попередження.

Дата продажу: _____

Підпис/Печатка: _____